

AirPro®

Redression und Kontrakturbehandlung – sanft, schonend und effektiv

Die Dynamischen Orthesen „AirPro®“ sind zur Redression und Behandlung von Kontrakturen unterschiedlicher Gelenke entwickelt worden. Die Gelenke können damit etwas gestreckt werden. Im günstigen Fall lassen sich die Kontrakturen langfristig sogar dauerhaft mildern und zurückdrängen.

Das Verfahren ist einfach, aber sehr wirkungsvoll: Die Lufttaschen der AirPro® werden mit einer speziellen Handpumpe bis zu dem Punkt gefüllt, an dem bei Streckung des Gelenks der erste Widerstand zu spüren ist. Die Position gestattet einen sanften, bis zu einem gewissen Punkt auch überwindbaren, Druck in die Streckstellung des Gelenks. Lang anhaltende Dehnungen sind dabei gut tolerabel, wenn diese unerschwerlich appliziert werden.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Versorgung mit AirPro® ist, dass die verkürzten Weichteile und Muskeln gut auf Dehnung ansprechen.



AirPro® Orthesen sind indiziert bei:

- Weichteilverkürzungen und Kontrakturen, die gut auf Dehnung ansprechen
- Nach Schlaganfall
- Nach Schädel-Hirn-Verletzung
- Nach Hirnblutung
- Nach Hirninfarkt
- Nach Hirnentzündung
- Nach Eingriffen am ZNS
- Nach zentralen Ereignissen, die zu Tonuserhöhung und Muskelverkürzung führen oder bereits geführt haben
- Post OP zur Sicherung des Operationsergebnisses
- Post OP zur Sicherung z.B. der Hüftabspreizung nach Totalendoprothese des Hüftgelenks, um eine Adduktion der Hüfte zu vermeiden


Hilfsmittelnummer in Vorbereitung



Bestellbogen AirPro®

Fax bitte an (0 61 03) 7 06 42 - 39

Anwendungsbeispiel: AirPro® Dynamische Finger-Handgelenksorthesen

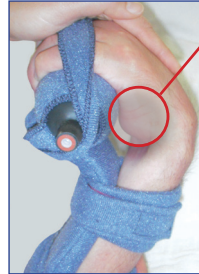

Entlastung Haut auf Haut

AirPro® Dynamische Finger-Handgelenksorthesen

Bestell-Nr.:	Größe
AP-DH-S-1001	Kinder (S)
AP-DH-M-1002	M

Anwendungsbeispiel: AirPro® Dynamische Finger-Hand-Orthesen bei ausgeprägter Fehlstellung der Finger und der Hand, hier ausschließlich Handmodul



AirPro® Dynamische Finger-Hand-Orthesen

Bestell-Nr.:	Größe
AP-DF-S-1010	Kinder (S)
AP-DF-M-1020	M

Öffnen der Hand und Entlastung der Hautfalte, Vermeidung Haut auf Haut

Anwendungsbeispiel: AirPro® Dynamische Ellenbogenorthesen



Handhabung ähnlich wie bei der Versorgung im Bereich der Kniebeuge. Im Ellenbogenbereich ist die Schienenführung jedoch immer zwingend.

AirPro® Dynamische Ellenbogenorthesen

Bestell-Nr.:	Größe	Umfang Oberarm	Umfang Unterarm
AP-DE-S-2001	S	200 mm – 255 mm	125 mm – 200 mm
AP-DE-M-2002	M	230 mm – 290 mm	140 mm – 255 mm
AP-DE-L-2003	L	280 mm – 355 mm	230 mm – 300 mm
AP-DE-E-2010	zusätzliches Luftkammermodul		

AirPro® Dynamische Kniegelenksorthesen

Bestell-Nr.:	Größe	Umfang Oberschenkel	Umfang Unterschenkel
AP-DK-S-3001	S	300 mm – 380 mm	200 mm – 280 mm
AP-DK-M-3002	M	380 mm – 455 mm	300 mm – 380 mm
AP-DK-L-3003	L	455 mm – 560 mm	380 mm – 480 mm

Anwendungsbeispiel: AirPro® Dynamische Kniegelenksorthesen



Anwendungsbeispiel: AirPro® Dynamische Hüftführungsorthesen



AirPro® Dynamische Hüftführungsorthesen

Bestell-Nr.:	Größe	Umfang 10 cm oberhalb des Knies
AP-DO-M-4001	M	280 mm – 455 mm
AP-DO-L-4002	L	480 mm – 685 mm

Bestellung erfolgt gemäß den AGB von Pro Walk GmbH:

Stempel/Unterschrift: